



ATTITUDE
PURE LIBERTÉ

WHAT'S YOUR ATTITUDE?

GOÛTEZ À LA LIBERTÉ COMME JAMAIS AUPARAVANT AVEC LE HANDBIKE ATTITUDE POUR FAUTEUIL ROULANT

Que vous vouliez faire du sport ou accroître votre mobilité, découvrez les trois visages du handbike Attitude de Empulse. La version manuelle offre un ensemble léger et simple à manoeuvrer. Si vous pensez avoir besoin d'une assistance électrique en cours de chemin, alors optez pour la version hybride. Avec l'Attitude 100% électrique vous apprécierez la mobilité à pleine puissance.



ATTITUDE Manual

LE SPORTIF





ATTITUDE Hybrid

LE TOUT-TERRAIN

TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE



ATTITUDE Power

LE PUISSANT




PRÊT À PARTIR EN QUELQUES SECONDES !

Le mécanisme d'ancrage du handbike Attitude est si astucieux qu'il suffit de quelques secondes pour l'attacher à votre fauteuil roulant ... et de le décrocher tout aussi rapidement. Idéal pour les personnes dont le temps est précieux.

Après avoir détaché la 3ème roue, seuls deux petits axes non contondants (170 g) restent sur votre fauteuil roulant.

- 1 Verrouillez sur les axes d'ancrage.
- 2 Ramenez vers le bas le levier de verrouillage.
- 3 Verrouillez la connexion en tirant le levier rouge.

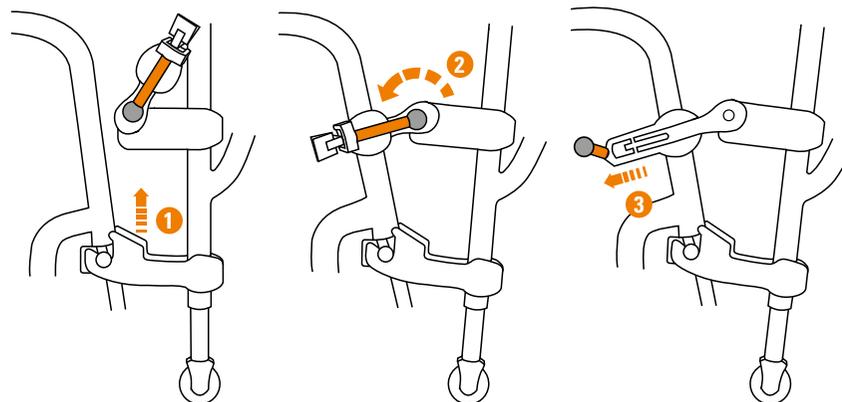

Prêt à regarder la vidéo
du système d'ancrage
de l'Attitude!



CHOISIR VOTRE POSITION IDÉALE

Avec son pédalier réglable en angle et en profondeur, l'Attitude Manual et Hybrid vous assurent une position confortable et ergonomique. Un réglage adéquat garantit une conduite énergique et efficace pour des longues distances en toute liberté.



MANUAL – LE SPORTIF

Améliorer ses capacités physiques et son endurance tout en prenant du plaisir en roulant, est un des atouts majeurs de la version manuelle. Sa roue de 20" procure une conduite exceptionnelle, quel que soit le terrain. Frein à disque pour un contrôle de sa vitesse tout en douceur. Réglage en angle et en profondeur de la potence du pédalier pour une position optimale.



Position du pédalier réglable en angle et en profondeur



ATTITUDE

Manual



MANUAL | HYBRID | POWER



// VITESSES (1X11)

Le dérailleur à 11 vitesses est idéal pour tous les terrains. Frein à disque pour un meilleur contrôle de la vitesse.

TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE



// TRIGGER SHIFT

Levier de vitesse par 2 gachettes indexées facile à manier d'une seule main. Permet de changer de vitesse rapidement et facilement.



// ROULEZ AVEC STYLE

Coloris au choix pour le pédalier et/ou le carter de chaîne.



// FREIN DE PARKING

Simple à opérer avec fonction verrouillage. De série sur tous les modèles.

HYBRID – LE TOUT-TERRAIN

L'Attitude Hybrid combine tous les bienfaits d'une activité physique pour la santé et d'une assistance électrique fiable. La fonction électrique peut être engagée à chaque pente délicate ou tout simplement pour vous fournir cette petite pointe de vitesse qui vous manque!



Position du pédalier réglable
en angle et en profondeur



ATTITUDE

Hybrid



// BATTERIE LITHIUM-ION

Batterie Lithium-Ion 17,5 Ah pour plus d'autonomie. Ecran de contrôle de la capacité de la batterie.



// MOTEUR 250 WATT

Moteur puissant de 250 watt pour une assistance optimale sur terrains vallonnés ou sur de longues distances.



// TOUJOURS SOUS CONTRÔLE

Avec l'écran MMI de Neodrive vous avez le contrôle sur un certain nombre de paramètres, comme la vitesse, la distance ou le niveau de charge de la batterie.



// GUIDON ERGONOMIQUE

La position ergonomique des poignées empêche le contact avec votre corps, en particulier lorsque vous tournez dans les virages.

POWER – LE PUISSANT

Attitude Power pour une traction 100% électrique. Puissant, il vous permet de rouler off-road ou de circuler sur route à la vitesse qui vous convient. Vous restez confortablement assis dans votre fauteuil roulant; il vous suffit d'actionner le levier de vitesse pour avancer. Relaxez-vous et profitez pleinement de votre ballade avec Attitude Power !



ATTITUDE

Power



// MOTEUR 250 WATT

Puissant moteur de 250 watt pour une vitesse de 15 km/h.



// GUIDON RÉGLABLE

Le guidon est réglable en hauteur via la potence et de façon progressive. L'écran affiche une variété d'informations de conduite.



// BATTERIE LITHIUM-ION

Batterie Lithium-Ion 9 Ah ou 13,4 Ah pour une autonomie maximale. Les batteries Lithium-Ion possèdent une haute densité d'énergie et aucun effet mémoire.



// ÉCLAIRAGE AVANT

Lumière avant efficace, directement alimentée par la batterie.

DONNÉES TECHNIQUES

ATTITUDE	<i>Manual</i>	<i>Hybrid</i>	<i>Power</i>
Poids max. Utilisateur	100 kg	100 kg	100 kg
Largeur châssis avant (réglage +2 cm)	260 – 460 mm	260 – 460 mm	260 – 460 mm
Poids fixations sur fauteuil	170 g	170 g	170 g
Poids total Attitude	14,5 kg	21,5 kg	15,3 kg
Diamètre roue	20"	20"	16"
Vitesse maximale	–	23 km/h	6 km/h, 10 km/ph, 15 km/h
Moteur	–	250 W	250 W
Batterie	–	17,5 Ah	9 Ah & 13,4 Ah
Poignées changement de vitesse	Trigger Shifter	Trigger Shifter	–
Dérailleur	11	10	–
Largeur pédalier en V	470 mm	470 mm	–
Longueur pédalier	170 mm	170 mm	–
Largeur guidon	–	–	570 mm
Frein	Disque (180 mm)	Disque (180 mm)	Disque (180 mm)
Frein de parking	oui	oui	oui
Coloris	24	24	24
Marquage CE	oui	oui	oui



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Lès-Tours
 Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
 E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Pour plus d'informations sur les spécifications complètes, les options et les accessoires, veuillez vous reporter à la fiche de mesure. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la Société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, veuillez vous reporter à la fiche technique/fiche de mesure ou au manuel d'utilisation.