

ABENA Man Formula 0, Premium

INCONTINENCE

ABENA Man

Formula 0


19 x 23 cm


Formula 0

Formula 1

Formula 2

Slipguard

Special


UTILISATEURS

HOMME

AUTONOME

INCONTINENCE LÉGÈRE

FUITES MINEURES

Description

ABENA Man Formula est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, spécialement développée pour les hommes, pour fournir une solution discrète et sécurisée en cas d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Man Formula doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Man Formula dispose d'une enveloppe externe de couleur grise rendant son utilisation très discrète, totalement adaptée aux hommes mobiles.



Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme « T » a été conçue pour permettre un ajustement à l'anatomie masculine sur-mesure.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.



Barrières anti-fuites

Le système de barrières anti-fuites unique, avec poches intégrées, permet un ajustement parfait à l'anatomie masculine et offre une protection totale tout en bougeant librement.



Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA Man Formula 0, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	230 mm – 190 mm
Poids (+/-10%) :	12,2 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	250 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



Le produit ne contient pas
de latex



100% des fibres de cellulose
utilisées proviennent de sources
durables certifiées FSC™.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit
peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est
conforme à toutes les précautions de
sécurité, conformément aux normes et à la
légalisation du Royaume-Uni.



30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO² de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



ABENA Man Formula 0, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES


Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
14	5713571001103	190	13 x 9 x 14,5	224	3 couches de 8 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette (gerbée)	Hauteur palette (cm)
16	5713571001110	3 523	40 x 30,3 x 32	24 (48)	110



GUIDE D'UTILISATION


Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA man Formula 0 est recommandée si vous souffrez de fuites urinaires mineures, par exemple lors de votre déplacement au toilette parce que vous ne pouvez les retenir.

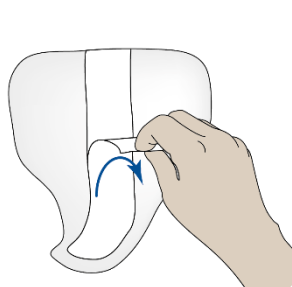

Déplier la protection et la plier légèrement sur la longueur pour relever les poches.



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.

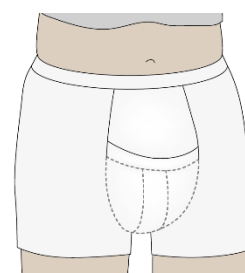

Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Identification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL



www.abena-frantex.fr

