



IPL 5800
PURE SKIN PRO

beurer
beauty

IPL PURE SKIN PRO Appareil d'épilation longue durée

 german
engineering



Application gratuite MyIPL pour vous guider lors de vos traitements - pour un traitement professionnel suivi à domicile



Jusqu'à 600 000 impulsions



Avec fonction "flash en série" pour une utilisation rapide et confortable



Appareil compact pour une épilation longue durée - résultats durables pendant plusieurs mois

Design compact: idéal pour traiter les petites surfaces du corps ou bien celles qui sont difficiles à atteindre

Nécessite seulement 20 minutes pour traiter le corps entier¹⁾

Surface lumineuse de 3,1 cm² pour un traitement ultra rapide

3 différents niveaux d'intensité

Technologie testée cliniquement - utilisation sécurisée à la maison

Une sécurité unique grâce au capteur 2 en 1 pour le type de peau et le type de contact

Jusqu'à 50% de poils en moins après 3 / 4 séances seulement

Technologie de lumière pulsée IPL ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle. La lumière pulsée intense désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse.

Protection UV intégrée pour protéger la peau

Ne convient pas aux peaux foncées



Peut être inefficace sur les peaux blanches ou trop claires

Adaptateur secteur:

Input: 100-240 V~; 50/60Hz; 500 mA

Output: 12V 1.8A

Dimensions (LxIxH): 160 x 43 x 67 mm

Poids: approx. 180 g

Garantie 3 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 57500 7

Item no.: 575.00

* Dermatological study, 20 women, Institut proDERM Hamburg, study no. 14.0309-11

¹⁾ at minimum power level for arms, legs, face, armpits and the bikini line




german|engineering


IPL 5800
VELVET SKIN PRO

beurer
beauty


FONCTIONNEMENT

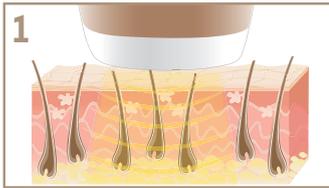

1
La mélanine des poils absorbe la lumière (IPL)

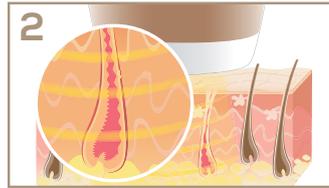


2
La chaleur produite désactive le follicule pileux

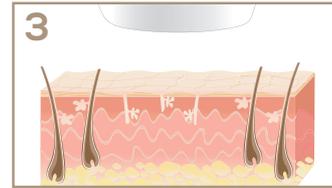

3
Le poil tombe et ne repousse plus

Tableau des teintes de poils et de peaux

		Skin color					
Hair color		X	X	X	X	X	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X

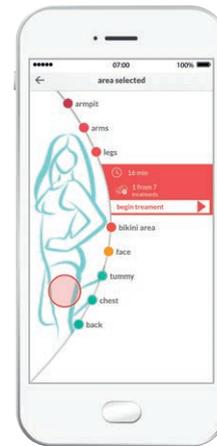

TRAITEMENT



works with

Download on the **App Store**

GET IT ON **Google Play**

• iOS ≥ 8.0
• Android™ ≥ 4.4

List of supported devices